

# Dagboek eventrecorder

**U krijgt in het ziekenhuis een opnameapparaat (een eventrecorder). Zodra u klachten krijgt moet u op het opnameapparaat het groene knopje 'rec' indrukken totdat u drie piepjes hoort. Dit start de opname. Er wordt vervolgens een opname gemaakt van ongeveer een minuut (afhankelijk van de instelling en klachten) van uw hartritme. Als u een lange piep hoort is de opname klaar.**

Vul in het schema hiernaast in welke dag en tijd het op dat moment is. Noteer ook welke klachten u heeft. Als u opnieuw klachten krijgt, kunt u gerust een nieuwe opname maken. U hoort van de laborante hoeveel opnames u kunt registreren. Als u per ongeluk een opname maakt kunt u de groene knop nogmaals indrukken. U hoort dan twee piepjes dan wordt deze opname gestopt.


### **Uitleg over de eventrecorder**

- Als u één piepje hoort wanneer u de groene knop indrukt is het geheugen vol.
- Als u elke 16 seconden een piepje hoort is de batterij bijna op. Neem contact op met de afdeling hartfunctie, het apparaat moet worden uitgelezen omdat anders de opnames verloren gaan.
- Als u een 'riedeltje' hoort na een opname is het geheugen vol.
- Boven op de eventrecorder knippert een groen lampje, de eventrecorder staat dan op stand-by.
- Met het gele knopje op de eventrecorder hoeft u niets te doen.

### **Vragen**

Neem dan gerust contact op met de afdeling hartfunctie, op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, (0318) 43 53 61.



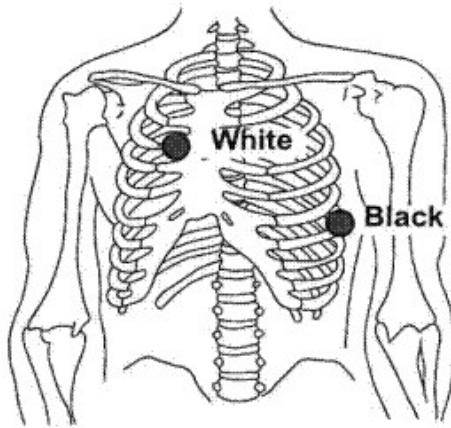

Plakplaatsen voor de eventrecorder